


CE 0123

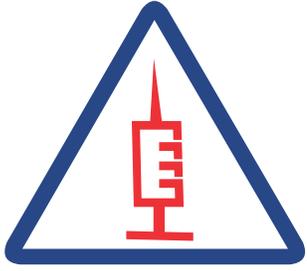

A SYSMECH - MAIS JOINT VENTURE

Mais India

The health care specialist



Sanando el mundo con los mejores productos médicos™

+ 91 8448822362

sales@maisindia.com

www.maisindia.com





Mais India Medical Devices Pvt. Ltd. es una alianza entre Mais Medical, líder mundial multimillonario, y **Sysmech Enterprises**, líder mundial en fabricación de maquinaria médica. El lema de esta alianza es garantizar que los productos médicos de un solo uso lleguen a todo el mundo a precios asequibles, con una calidad inigualable y de acuerdo con los estándares internacionales. La empresa es una de las líderes en el sector sanitario. Utilizamos tecnología de vanguardia e instalaciones de fabricación ultramodernas para fabricar productos de primera calidad. Nuestra fortaleza reside en nuestro equipo de ingenieros con una amplia experiencia (más de tres décadas) y tecnócratas capacitados, totalmente comprometidos con la innovación continua y la investigación de vanguardia.

Nos enorgullece estar afiliados a SGS. Cumplimos con las normas nacionales e internacionales pertinentes, como el Reglamento de Dispositivos Médicos de la India (MDR) 2017, la norma EN ISO 13485:2016 y la MDD 93/42/CEE, con sus modificaciones, en cada etapa de producción. Contamos con salas blancas de clase 10.000 para el ensamblaje y blíster de productos, y salas blancas de clase 100.000 para el moldeo por inyección. También contamos con un laboratorio analítico interno para las pruebas de productos en proceso y terminados de toda nuestra gama de productos. Somos una de las pocas empresas que cuenta con un sistema de visión totalmente automático para el ensamblaje final.

Visión

Buscamos garantizar que los beneficios de la mejor tecnología moderna en atención médica estén disponibles para todos a un precio asequible.

Misión

Convertirnos en una corporación reconocida por su papel fundamental en el bienestar de la humanidad, mediante la producción de productos médicos de alta calidad a precios más bajos, utilizando tecnología de vanguardia e investigación incesante.

Investigación y desarrollo

Realizamos una intensa investigación y desarrollo interno para todos nuestros productos y procesos, y trabajamos continuamente en la invención de máquinas y procesos de producción especiales para mejorar la calidad de la producción y los productos. La mejora constante de los diseños existentes, mediante el uso de los últimos conocimientos técnicos y la inversión en ensayos, se traduce en el uso de nuestro capital intelectual en los diseños y equipos. Contamos con personal altamente capacitado y experimentado. Nuestro departamento de I+D siempre se centra en agregar valor a los diseños existentes.

Gama de productos

Terapia de infusión

Cánula intravenosa de seguridad
 Cánula intravenosa
 Llave de tres vías con tubo de extensión
 Llave de tres vías con clic de 45°
 Llave de tres vías
 Equipo de infusión intravenosa con ventilación de aire / sin ventilación de aire
 Equipo de infusión intravenosa con microgoteo
 Equipo de infusión premium con nuevas características y calidad mejorada
 Equipo de infusión intravenosa con regulador de flujo
 Equipo de transfusión sanguínea con ventilación de aire / sin ventilación de aire
 Equipo de administración de líquidos con volumen medido
 Equipos de extensión multilumen
 Con conector sin aguja / tapón de inyección
 Equipo de extensión con regulador de flujo intravenoso
 Bomba de infusión desechable / Bomba de infusión elastomérica
 Línea de extensión de alta presión con protección UV
 Línea de extensión de baja o alta presión (simple y espiral)

Anestesia y cuidados respiratorios

Máscara de oxígeno
 Equipo de oxígeno nasal de doble calibre
 Máscara nebulizadora
 Soporte para catéter
 Filtro HME
 Aguja espinal
 Circuito respiratorio
 Espirómetro Mai
 Tubo endotraqueal (simple/con balón)
 Tubo endotraqueal reforzado (simple/con balón)

Endoscópico

Clips de ligadura

Cirugía y sistema de drenaje

Equipo de succión Yankauer
 Grapadora de piel



Urología Nefrología

Catéter de Foley

Cuidado renal

Catéter de hemodiálisis

“La calidad no es un acto, es un hábito”

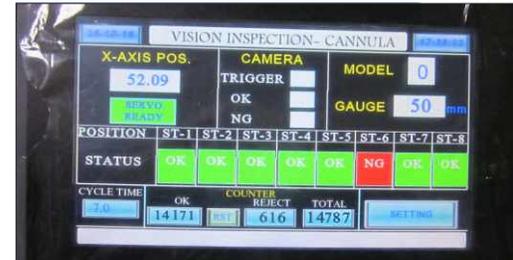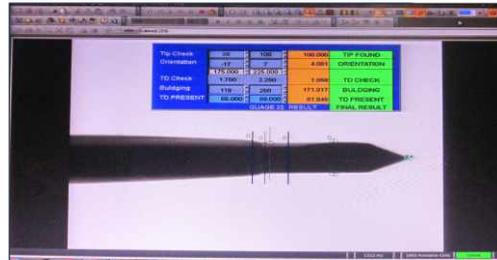

Error manual de cero

Carga biológica mínima

Calidad constante en todos los niveles

Mais India Medical Devices Pvt. Ltd. es una de las pocas empresas de productos médicos desechables que cuenta con un sistema automático de inspección por visión computarizada para toda su planta de fabricación. Cada dispositivo terminado se compara con un modelo maestro mediante cámaras de alta resolución. Esto, sumado a nuestras líneas de montaje de producción totalmente automatizadas y a nuestra moderna e innovadora capacidad de I+D, nos da la confianza para garantizar una calidad inigualable.

Especificaciones técnicas

- Orientación de la aguja
- Daños en la punta de la aguja
- Distancia de corte
- Calidad de la punta del catéter
- Variación de la longitud de la aguja y el catéter
- Rebaba de la aguja

Tamaño	Código de colores	Diámetro exterior mm	Longitud del catéter mm	Caudal ml./min
14G	Naranja	2.1	45	300
16G	Gris	1.7	45	200
17G	Blanco	1.5	45	140
18G	Verde	1.3	45	95
18G	Verde	1.3	32	95
20G	Rosa	1.1	32	62
22G	Azul	0.9	25	33
24G	Amarillo	0.7	19	20
26G	Violeta	0.6	19	15



Código de producto:
I1510107XX* (FEP R/O, MGP)
I1510106XX* (PUR R/O, MGP)



Código de producto:
I1520211XX* (FEP R/O, MGP)
I1520205XX* (PUR R/O, MGP)

MaisSafe Clip™

Cánula intravenosa de seguridad con puerto de inyección y alas

- Dispositivo de seguridad adicional para prevenir pinchazos con agujas.
- Activación irreversible del mecanismo de seguridad.
- Cuerpo con alas de color.
- Disponible en variantes PUR/FEP.
- Disponible en embalaje Tyvek/MGP.
- Tamaños: 14G a 26G.

Maiswin Safe Clip™

Cánula intravenosa de seguridad sin puerto de inyección ni alas

- Función de seguridad adicional para prevenir pinchazos con agujas.
- Activación irreversible del mecanismo de seguridad.
- Cuerpo de color.
- Disponible en variantes PUR/FEP.
- Disponible en empaque Tyvek/MGP.
- Tamaños: 14G a 26G.



Código de producto:
I1610203XX* (FEP R/O, MGP)
I1610201XX* (PUR R/O, MGP)



Código de producto:
I1630309XX* (FEP R/O, MGP)
I1630305XX* (PUR R/O, MGP)

MaisProtect™

Cánula intravenosa de seguridad con puerto de inyección y alas

- Dispositivo de seguridad adicional para prevenir pinchazos con agujas.
- Activación irreversible del mecanismo de seguridad.
- Cuerpo con alas de color.
- Disponible en variantes PUR/FEP.
- Disponible en embalaje Tyvek/MGP.
- Tamaños: 14G a 26G.

Maiswin Protect™

Cánula intravenosa de seguridad sin puerto de inyección ni alas

- Función de seguridad adicional para prevenir pinchazos con agujas.
- Activación irreversible del mecanismo de seguridad.
- Cuerpo de color.
- Disponible en variantes PUR/FEP.
- Disponible en empaque Tyvek/MGP.
- Tamaños: 14G a 26G.



Código de producto:
I1070101XX* (FEP R/O, MGP)
I1070103XX* (FEP R/O, Tyvek)
I1070104XX* (PUR R/O, Tyvek)
I1070105XX* (PUR R/O, MGP)



Código de producto:
I1060309XX* (FEP R/O, MGP)
I1060311XX* (FEP R/O, Tyvek)
I1060312XX* (PUR R/O, Tyvek)
I1060310XX* (PUR R/O, MGP)

MaisSafe™

Cánula intravenosa de seguridad con puerto de inyección y alas

- Dispositivo de seguridad adicional para prevenir pinchazos con agujas.
- Activación irreversible del mecanismo de seguridad.
- Cuerpo con alas de color.
- Disponible en variantes PUR/FEP.
- Disponible en embalaje Tyvek/MGP.
- Tamaños: 14G a 26G.

Maiswin Safe™

Cánula intravenosa de seguridad sin puerto de inyección ni alas

- Función de seguridad adicional para prevenir pinchazos con agujas.
- Activación irreversible del mecanismo de seguridad.
- Cuerpo de color.
- Disponible en variantes PUR/FEP.
- Disponible en empaque Tyvek/MGP.
- Tamaños: 14G a 26G.

Terapia de infusión



Código de producto: I1410104XX*
(PUR R/O, MGP)



Código de producto: I1440304XX*
(PUR R/O, MGP)

MaiSafe Valve™

CÁNULA I.V. DE SEGURIDAD PARA EL CONTROL DE SANGRE Sin puerto de inyección ni alas

- Dispositivo de seguridad adicional para prevenir pinchazos con agujas
- Activación irreversible del mecanismo de seguridad
- Cuerpo de color
- Disponible en variantes PUR/FEP
- Disponible en envase MGP
- Tamaños: 14G a 26G


Maiscan Safe Valve™

CÁNULA I.V. DE SEGURIDAD PARA EL CONTROL DE SANGRE Sin puerto de inyección y con alas

- Dispositivo de seguridad adicional para prevenir pinchazos con agujas.
- Activación irreversible del mecanismo de seguridad.
- Cuerpo con alas de color.
- Disponible en variantes PUR/FEP.
- Disponible en envase MGP.
- Tamaños: 14G a 26G.



Código de producto:
101703XXXX*

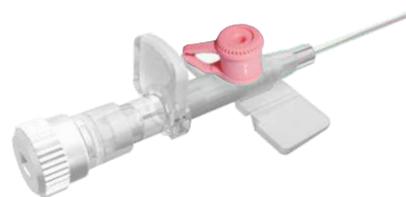

Código de producto:
101101XXXX*

Maisflon Premium™

Cánula intravenosa con tapa abatible y alas de color

- Puerto de inyección con válvula de inyección de silicona unidireccional
- Cono luer del 6 % para compatibilidad con todos los dispositivos estándar
- Disponible en variantes de PUR/FEP
- Disponible en empaque Tyvek/MGP
- Tamaños: 14G a 26G

Maisflon™

Cánula intravenosa con puerto de inyección y alas

- Puerto de inyección con válvula de inyección de silicona unidireccional
- Cono luer del 6 % para compatibilidad con todos los dispositivos estándar
- Disponible en variantes de PUR/FEP
- Disponible en empaque Tyvek/MGP
- Tamaños: 14G a 26G



Código de producto:
101613XXXX*



Código de producto:
10161428XX*

Maiswin™

Cánula intravenosa sin puerto de inyección ni alas

- Cuerpo de color
- Cuerpo principal especialmente diseñado con proyección para una menor separación entre puntos y facilitar su manejo
- Disponible en variantes PUR/FEP
- Disponible en empaque Tyvek/MGP
- Tamaños: 14G a 26G

Maispen™


Cánula intravenosa sin puerto de inyección ni alas (tipo pluma)

- Cuerpo y tapa de color
- Cuerpo principal especialmente diseñado con proyección para una menor separación entre puntas y un mejor manejo
- Disponible en variantes PUR/FEP
- Disponible en empaque Tyvek/MGP
- Tamaños: 14G a 26G

Maisflex™

Cánula intravenosa con puerto de inyección y alas (Retrospectiva instantánea)

- Confirmación instantánea de una venopunción exitosa
- Visualización rápida del flujo sanguíneo a lo largo del cuerpo del catéter, lo que facilita el acceso a la vena por parte del médico
- Puerto de inyección con tapa abatible y válvula de inyección de silicona unidireccional
- Cono Luer del 6 % para compatibilidad con todos los dispositivos estándar
- Disponible en variantes de PUR/FEP
- Disponible en empaque Tyvek/MGP
- Tamaños: 14G a 26G

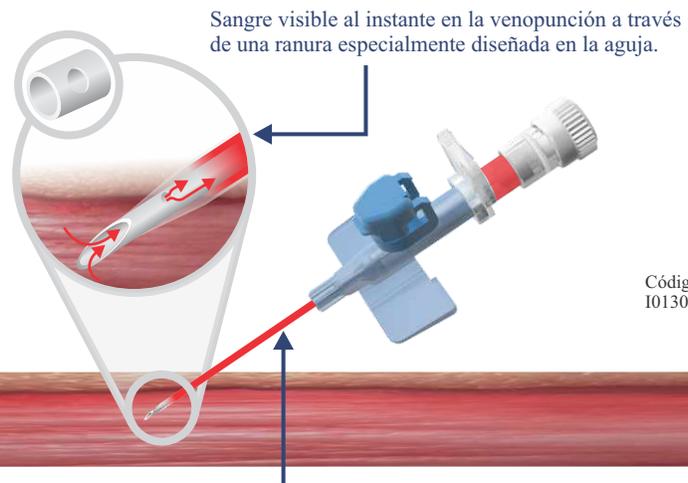

Código de producto:
101304XXXX*

Visualización instantánea del flujo sanguíneo a través de una hendidura en la aguja
Confirma venopunción exitosa



Código de producto:
101206XXXX*



Código de producto:
10310101XX

Maiscan™

Cánula intravenosa sin puerto de inyección y con alas

- Cuerpo de ala de color
- Cuerpo principal especialmente diseñado con proyección para una menor separación entre puntos y facilitar su maniobrabilidad
- Disponible en variantes PUR/FEP
- Disponible en empaque Tyvek/MGP
- Tamaños: 14G a 26G



*XX= 01-Azul
02-Rojo
03-Blanco

Código de producto:
10281101XX*
10281201XX* (Resistente a los lípidos)

Maisway Extension™

Llave de paso de tres vías con tubo de extensión

- Llave de paso de tres vías en un extremo y conector Luer-Lock macho en el otro extremo del tubo de extensión.
- Tubo de alta calidad resistente a las torceduras que proporciona un flujo uniforme. Conicidad universal del 6% para su compatibilidad con una amplia gama de otros equipos médicos.
- Símbolos de flecha para indicar la dirección del flujo.
- Volumen mínimo de cebado necesario para la correcta administración del fármaco.
- La llave de paso de tres vías integrada ofrece múltiples líneas de infusión.
- Longitudes de tubo disponibles (cm): 10, 25, 50, 80, 100, 150, 200



*XX= 01-Blue
02-Red
03-White

Código de producto:
10210101XX*
10220101XX* (Resistente a los lípidos)

Maisway Click™

Llave de paso de tres vías, clic 45°

- Soporta presiones de hasta 4,5 bar (65 psi)
- Movimiento suave
- Volumen de cebado mínimo para una administración precisa del fármaco
- Altamente transparente (sin tinte azulado)
- Conectores luer macho giratorios y dos conectores luer hembra
- Indicación de flecha en el mango para indicar la dirección del flujo
- La conexión tiene una conicidad del 6% para garantizar un ajuste sin fugas

Maisway™

Polla de parada de tres vías

- Capacidad de manejo de presión: hasta 10 bar
- Conicidad universal del 6% para compatibilidad con una amplia gama de equipos médicos.
- Flecha indicadora en el mango para indicar la dirección del flujo.
- Diseño con un volumen de cebado mínimo para garantizar la correcta administración del medicamento.
- Disponible en versión resistente a lípidos y no resistente a lípidos.
- Disponible en: Azul, Rojo y Blanco



Sin látex

Código de producto:
I123000200 (lumen único)
I123000201 (Doble lumen)
I123000202 (triple luz)

Juegos de extensión

Juegos de extensión multilúmenes con conector sin aguja y tapón de inyección

- Conector luer macho en un extremo y conector hembra sin aguja/tapón de inyección en el otro.
- Tubo de alta calidad resistente a las torceduras que proporciona un flujo uniforme.
- Superficie interna lisa para minimizar la variación del flujo.
- Abrazadera deslizante para detener el flujo inmediatamente.
- Disponibles: lumen simple, lumen doble y lumen triple.
- Longitud de los tubos: 10-30 cm.
- Disponibles en calibre pequeño y calibre grande.



Sin látex

Código de producto:
I090010000

Maisflow™

Juego de extensión del regulador de flujo intravenoso

- Control preciso del caudal de fluidos intravenosos con un rango de 5 a 250 ml/h
- Con puerto de inyección en Y (látex o) para medicación intermitente
- También disponible con puerto de inyección en Y con soporte para el pulgar y punto de inyección en Y sin aguja
- Tubo de PVC suave y resistente a las torceduras
- Longitud estándar del tubo: 20 cm sin punto de inyección en Y y 40 cm con punto de inyección en Y
- Diámetro del tubo: I Ø 3,0 mm, O Ø 4,1 mm



Código de producto:
I0700207XX

UV Mais Protect Line™

Línea de extensión de alta presión con protección UV

- Todos los medicamentos sensibles a la luz están protegidos gracias a la protección contra la luz hasta 520 nm.
- Tubo naranja translúcido. Resistente a presiones de hasta 2 bar.
- Identificación más sencilla de los desechables protegidos contra la luz gracias a su característico código de color naranja.
- El tubo está hecho de PE (polietileno), libre de PVC, libre de DEHP y libre de látex.
- Diámetro de tubo pequeño (1,0 x 2,0 mm) para reducir el volumen residual.
- Características de baja absorción para el uso con fármacos de alta potencia.
- Excelentes características de arranque, libre de látex y DEHP, resistente a las torceduras.
- Disponible en diferentes longitudes (150 cm y 200 cm).



Sin DEHP

Sin látex

Código de producto:
I112000201

Conector sin aguja

Conector sin aguja / Tapón de inyección sin aguja

- La carcasa está impregnada con PC, lo que ayuda a reducir las infecciones.
- La parte superior lisa se puede limpiar eficazmente con las prácticas de desinfección estándar y aceptables.
- El paso de fluido directo mejora la capacidad de lavado.
- La ausencia de espacio muerto ayuda a prevenir problemas causados por coagulación sanguínea, dificultad en el paso de fluido o interacciones con medicamentos incompatibles.
- Tecnología de válvula de tabique dividido.



Código de producto:
I19100XXXX

Bomba de infusión elastomérica

Bomba de infusión desechable

- Bomba de infusión elastomérica de un solo uso para la infusión de citostáticos, antibióticos, analgésicos, anestésicos y más. Esta bomba ofrece a los pacientes una gran movilidad durante el tratamiento y es una alternativa segura y sencilla a los dispositivos electrónicos.
- Fácil aplicación, funciona sin fuentes de energía externas.
- Amplia gama de caudales, volúmenes de llenado y modelos especiales.
- Perfectamente adaptada a las necesidades de la aplicación.
- Alta precisión de administración, cómoda y discreta para el paciente.
- El filtro de aire y partículas, así como la línea de infusión resistente a las torceduras, garantizan la máxima seguridad.
- Permite el tratamiento ambulatorio y el alta temprana de forma rentable.
- Sin látex ni DEHP.
- Disponible en 50 ml, 100 ml, 250 ml, 275 ml, con y sin PCA.



Código de producto:
I0700000XX (Presión alta)
I0710000XX (Presión alta-S)

01-10cm
02-25cm
03-50cm
04-100cm
05-150cm
06-200cm

Línea de extensión de alta presión

Línea de extensión de baja o alta presión (simple y espiral)

- Línea de extensión transparente (con pegatinas de colores)
- Luer-lock macho y hembra del 6%.
- Tubo de PVC resistente a las torceduras.
- Diámetro del tubo: Int. (1,0 mm) Ext. (3,0 mm) y capacidad de presión: 800 psi.
- Superficie interna lisa para minimizar la variación del flujo.
- Tamaños (liso): 25, 50, 100, 150, 200 cm.
- Tamaños (espiral): 100, 150, 200, 300, 400 cm.

Terapia de infusión

Transductor de presión desechable

- Los transductores de presión médicos son transductores médicos especializados que pueden detectar la presión y convertirla en señales de salida digitales o de otro tipo.
- Compatible con una amplia gama de monitores de forma sencilla: la variedad es completa y se puede utilizar con diversos monitores, tanto en casa como en el extranjero (incluidos Mindray, Philips, etc.).
- Aplicable a múltiples departamentos clínicos: anestesiología, UCI, cardiología, laboratorio de cateterismo, etc.
- Medición de la presión arterial invasiva en tiempo real precisa y consistente;
- La vía de fluido claro permite el cebado durante el monitoreo;
- Dispositivo de descarga Snap-Tab versátil y fácil de usar, muy intuitivo para el personal de enfermería, quienes suelen operar el dispositivo.
- La cantidad de sangre necesaria para medir la presión arterial es entre el 20% y el 30% de la del tipo ordinario.
- Disponible en lumen simple y lumen doble.



Código del producto :
I2010001XX

Anestesia y cuidados respiratorios



Código de producto:
A030010100 (ADULTA)
A031010100 (NIÑA)
A032010100 (NIÑO)



Código de producto:
A070000100

Mais Neb™

Máscara nebulizadora

- Mascarilla de aerosol suave, transparente y anatómica, ideal para uso prolongado.
- Mascarilla transparente (con orificios) fabricada en PVC no tóxico de grado médico.
- Cámara nebulizadora (6 ml) para contener el medicamento líquido, con un orificio de ventilación en forma de embudo que permite que el oxígeno a altos flujos convierta el medicamento líquido en gotas para llegar a los pulmones.
- Tubo de extensión flexible, resistente a las torceduras, de 200 cm de longitud, no plegable (Star Lumen) para conectar a la fuente de oxígeno.
- Tamaños: Adulto, Niño, Bebé.

Montaje del catéter

- El conector de codo doble giratorio con puerto de succión y tapa proporciona mayor flexibilidad, fácil acceso y comodidad.
- El conector de 15 mm de diámetro interior y 22 mm de diámetro exterior se adapta a todos los tubos traqueales.
- El conector hembra estándar de 22 mm es compatible con todos los circuitos de respiración y ventilación.



Código de producto:
A120000100 (ADULTA)
A120000101 (PEDIÁTRICA)



Punto Quincke



Punta de lápiz

Código de producto:
A1500001XX (Punto Quincke)
A1510001XX (Punta de lápiz)

Filtro HME

- El filtro HME se utiliza en los circuitos respiratorios del paciente para evitar la posible contaminación cruzada entre el paciente y la máquina.
- Dimensiones: 77,0 mm x Ø58,5 mm
- Peso: 27,0 g (aprox.)
- Área de filtración efectiva: 27,3 cm²

Aguja espinal

- Apto para anestesia raquídea.
- La punta cónica proporciona una excelente respuesta táctil.
- El alto caudal permite un retorno más rápido del líquido cefalorraquídeo (LCR).
- Distribución eficaz del anestésico tras la inyección.
- Sin látex ni DEHP.
- Disponible en punta Quincke y punta de lápiz.
- Tamaños: 19 G a 27 G x 90 mm (3,5") de longitud de aguja.

Tubo endotraqueal reforzado

- Se utiliza para mantener la vía aérea permeable y ventilar mecánicamente a los pacientes.
- Fabricado en PVC de grado médico, no tóxico ni irritante.
- Pared del tubo con refuerzo metálico en espiral uniforme para evitar que se doble.
- El refuerzo facilita la posición y verificación del tubo durante la radiografía.
- Posicionamiento preciso y seguro garantizado por marcas de graduación y una línea radiopaca de punta a punta.
- El balón de alto volumen y baja presión garantiza un sellado eficiente del balón a baja presión (para tubos con balón).
- Conector universal de 15 mm en el extremo proximal.
- Se recomienda su uso con bloque de mordida/vía aérea de Guedel.
- Estéril con óxido de etileno (ETO) y libre de pirógenos. Para un solo paciente.

Esposada



Plano

N.º de referencia del producto		
Tamaño	Plano	Esposada
2.0	A097000100	-
2.5	A097000101	-
3.0	A097000102	-
3.5	A097000103	A092000103
4.0	A097000104	A092000104
4.5	A097000105	A092000105
5.0	A097000106	A092000106
5.5	A097000107	A092000107
6.0	A097000108	A092000108
6.5	A097000109	A092000109
7.0	A097000110	A092000110
7.5	A097000111	A092000111
8.0	A097000112	A092000112
8.5	A097000113	A092000113
9.0	A097000114	A092000114
9.5	A097000115	A092000115
10.0	A097000116	A092000116

Tubo endotraqueal (simple/con balón)

- Fabricado en PVC (cloruro de polivinilo) de grado médico, no tóxico, transparente y termorresistente.
- Balón de alto volumen, baja presión y forma uniforme con balón piloto integrado al tubo para una colocación segura dentro de la tráquea.
- Equipado con un conector estándar de 15 mm para su conexión a todos los circuitos de ventilación estándar en quirófanos o unidades de cuidados intensivos.
- Marcas graduadas para visualizar la distancia desde la punta.
- Bien marcado para indicar el diámetro interno/externo.
- Punta nasal apta para intubación nasal y oral.
- Líneas radiopacas de longitud completa para evaluar radiográficamente la posición del tubo.
- Ojo de Murphy cerca de la punta para evitar cualquier obstrucción.

Esposada



Plano

N.º de referencia del producto		
Tamaño	Plano	Esposada
2.0	A091000100	-
2.5	A091000101	-
3.0	A091000102	-
3.5	A091000103	A090000103
4.0	A091000104	A090000104
4.5	A091000105	A090000105
5.0	A091000106	A090000106
5.5	A091000107	A090000107
6.0	A091000108	A090000108
6.5	A091000109	A090000109
7.0	A091000110	A090000110
7.5	A091000111	A090000111
8.0	A091000112	A090000112
8.5	A091000113	A090000113
9.0	A091000114	A090000114
9.5	A091000115	A090000115
10.0	A091000116	A090000116

Endoscópico

Más clips de ligadura

Clips de ligadura endoscópica (titanio)


- Los clips de ligadura Mais son estériles, de un solo uso y fabricados con titanio de alta calidad.
- El clip en forma de V está diseñado para la ligadura de estructuras tubulares.
- Se suministran estériles y se utilizan para la ligadura de órganos y vasos sanguíneos en cirugía laparoscópica y abierta.
- Los aplicadores están disponibles en una amplia variedad de tipos de mordazas y longitudes.
- El titanio puro proporciona la máxima oclusión vascular y cero memoria, lo que evita que la punta se abra después de la aplicación.
- Biológicamente inerte, radiotransparente y no magnético, para su uso con equipos de resonancia magnética.
- Aplicadores abiertos con código de colores para facilitar su identificación. Aplicadores endoscópicos de 45 cm para cirugía bariátrica que ofrecen un alcance extendido.



Código de producto:
E0100101XX

Clips de ligadura endoscópica (polímero)

- Los clips de ligadura están fabricados con polímero no absorbible, inerte, no tóxico y bien tolerado por el organismo, además de ser muy resistentes en el tiempo.
- Dientes integrados para garantizar una mayor estabilidad y evitar el deslizamiento sobre el tejido.
- Una clara respuesta táctil confirma el asentamiento de la mandíbula y la colocación segura del vaso.
- Aplicadores para cirugía abierta y endoscópica equipados con un sistema de anclaje de precisión que permite que los clips se mantengan estables sin riesgo de pérdida accidental.
- El polímero no absorbible es inerte, no conductor, radiotransparente y no interfiere con los diagnósticos por TC, RM ni radiografía.

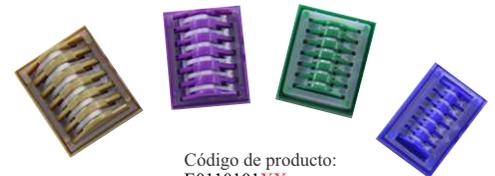

Código de producto:
E0110101XX

Grapadora Maiskin

Grapadora de piel

- Diseño simple y práctico, fácil de usar. Las grapas están hechas de acero inoxidable de alta calidad para uso médico.
- La alta velocidad de costura y grapado ayuda a acortar el tiempo de costura y a evitar la infección cruzada de diversas enfermedades contagiosas.
- El diseño del cabezal en ángulo proporciona una visión clara para asegurar la colocación precisa de las grapas. Además, el diseño del cabezal en ángulo facilita la penetración de las grapas en los tejidos.
- Retirar las grapas es indoloro y cómodo una vez cicatrizada la incisión quirúrgica.
- El diseño del mango de la grapadora proporciona una buena textura y comodidad para la mano del cirujano.
- Menor traumatismo para los pacientes
- Mejor efecto estético

Código de producto:
S020010100



Urología

FOLEDRAIN^{MT}

Catéter con balón de Foley

- Se utiliza para el drenaje urinario a corto y largo plazo.
- Fabricado con látex unido a elastómero de silicona, lo que elimina el riesgo de incrustaciones.
- El extremo distal es cónico, liso y con ojales sin rebabas para una intubación traumática.
- Incluye un balón simétrico de gran capacidad que garantiza una punta recta para un flujo urinario adecuado y una buena función del esfínter, previniendo fugas de orina.
- La capa de polímero de alta resistencia en el centro del catéter garantiza un diámetro interior más amplio y, por lo tanto, un alto caudal.
- Ojo liso, balón ultrafino y altamente elástico, y válvula antirretorno rígida para un inflado y desinflado sin problemas.
- La válvula está codificada por colores para una identificación instantánea del tamaño.



Presupuesto

Tipo	Ch/FR	Color	Diámetro exterior (mm)±0.33mm	Capacidad del globo (ml)	Longitud total (mm) Mínimo	Caudal (ml/min) Mínimo	Producto N.º de referencia		
2-Forma (Pediatria)	6	Azul	2.0	1.5-3	220	10	U031030106		
	8	Negro	2.7		220	15	U031030108		
	10	Gris	3.3		220	30	U031030110		
2-Forma (Adulta)	12	Blanco	4.0	5-15	360	50	U031030112		
	14	Verde	4.7		360	70	U031030114		
	16	Naranja	5.3	30-50	360	100	U031030116		
	18	Rojo	6.0		360	100	U031030118		
	20	Amarillo	6.7		360	100	U031030120		
	22	Morado	7.3		360	100	U031030122		
	24	Azul cielo	8.0		360	100	U031030124		
	26	Rosa	8.7		360	100	U031030126		
	28	Marrón	9.7		360	100	U031030128		
	30	Gris	10		360	100	U031030130		
	3-Forma (Adulta)	16	Naranja		5.3	30-50	360	100	U032030116
		18	Rojo		6.0		360	100	U032030118
20		Amarillo	6.7	360	100		U032030120		
22		Morado	7.3	360	100		U032030122		
24		Azul cielo	8.0	360	100		U032030124		
26		Rosa	8.7	360	100		U032030126		
28		Marrón	9.7	360	100		U032030128		
30	Gris	10	360	100	U032030130				

Juego de succión Yankauer

Mango Yankauer con tubo de conexión

- Mango de succión Yankauer moldeado con tubo flexible resistente a las torceduras.
- Se utiliza para la extracción de secreciones y sangre durante el perioperatorio, proporcionando una succión sin obstrucciones durante un uso prolongado.
- Los adaptadores suaves y flexibles en ambos extremos del tubo proporcionan un agarre seguro tanto al mango como a la fuente de succión.
- Apto para usar con o sin control de ventilación.
- El puerto de ventilación se cierra con una funda de ajuste hermético, que se puede retirar mediante una pequeña incisión para conectarlo al sistema de control de ventilación.
- Longitud del tubo: 250 cm (2,5 metros).
- Disponible con punta estándar y punta de corona.

Código de producto:
S010001XX (Punta estándar)
S0110001XX (Punta de la corona)



Punta estándar



Punta de la corona



Cuidado renal

Dilys Cath

Catéter de hemodiálisis

Características

1. Material de poliuretano flexible
2. Conector de sutura giratorio
3. Dilatador con diámetro exterior de variación gradual
4. Anti-dobleces, a prueba de fugas, estéril, empaquetado individualmente


Contenido del kit

- Catéter de hemodiálisis de poliuretano radiopaco
- Guía de nítol con punta J/St, con avance y punta extrasuave
- Jeringa desechable de 5 ml con visibilidad extraclara
- Jeringa guía de 5 ml que permite la inserción a través del émbolo de la jeringa
- Tapones de inyección • Sábana protectora
- Hoja de bisturí n.º 11 fácil de usar
- Aguja introductora que ofrece una inserción rápida y suave
- Dilatador de punta cónica larga con tope para evitar la inserción excesiva
- Sutura quirúrgica • Tarjeta de identificación del paciente

Presupuesto

Tipo	Tamaño	Código de producto
Doble lumen (curvo)	11.5Fr x 13cm	R021010209
Doble lumen (recto)	11.5Fr x 15cm	R021010110
Triple lumen (curvo)	12Fr x 13cm	R022010212
Triple lumen (recto)	12Fr x 15cm	R022010113



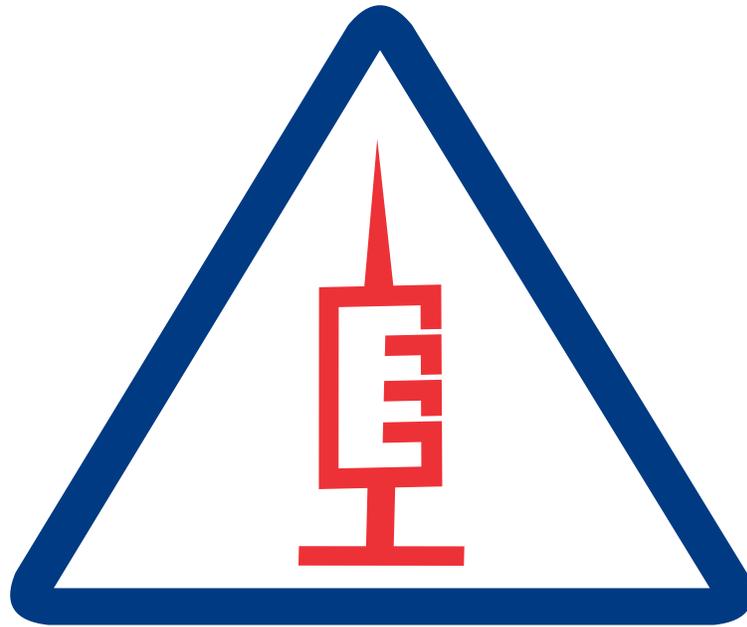

A SYSMECH - MAIS JOINT VENTURE

Mais India

The health care specialist

MAIS INDIA MEDICAL DEVICES PVT. LTD.

525-P, Sector-37, Pace City-II, Gurgaon, Haryana-122001, India.

Tel.: +91 124 404 7533

info@maisindia.com

Mob.: +91 8448822362

director@maisindia.in

www.maisindia.com